


REPLACEMENT DU FILTRE

Retirer le filtre à l'arrière de l'appareil et le remplacer par un filtre neuf ou un filtre préalablement nettoyé.

REMARQUE

Toujours utiliser l'appareil avec le dispositif de filtration mis en place et nettoyer ce dispositif régulièrement. Un dispositif de filtration absent ou complètement encrassé peut endommager l'appareil et entraîner des mauvaises odeurs.

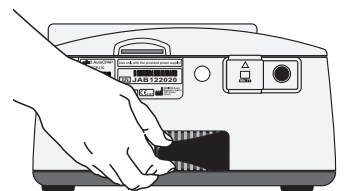

Retrait du filtre

NETTOYAGE

Nettoyage du filtre

1. Retirer le filtre à l'arrière de l'appareil.
2. Le nettoyer avec de l'eau savonneuse douce (ne pas utiliser d'autre produit), bien le rincer à l'eau claire et le laisser sécher à l'air.

Nettoyage quotidien du masque

1. Détacher le masque avec la valve d'expiration du tuyau d'assistance respiratoire.
2. Le nettoyer avec de l'eau savonneuse douce (ne pas utiliser d'autre produit), bien le rincer à l'eau claire et le laisser sécher à l'air tout en le mettant à l'abri des rayons directs du soleil.

Nettoyage hebdomadaire du tuyau d'assistance respiratoire

1. Détacher le tuyau d'assistance respiratoire de l'appareil et du masque.
2. Le nettoyer avec de l'eau savonneuse douce, bien le rincer à l'eau claire et le laisser sécher à l'air suspendu en position verticale..



Nettoyage hebdomadaire de l'appareil

1. Débrancher la fiche secteur.
2. Essuyer l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse, puis le sécher.

Nettoyage de l'appui-tête

Au besoin, nettoyer l'appui-tête comme suit :

1. Détacher l'appui-tête du masque.
2. Nettoyer l'appui-tête conformément aux instructions contenues dans le mode d'emploi du fabricant de l'appui-tête.

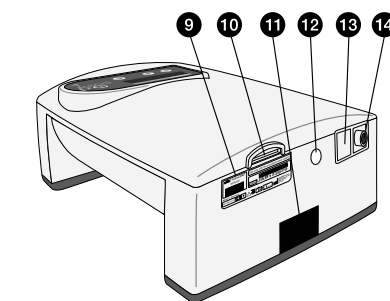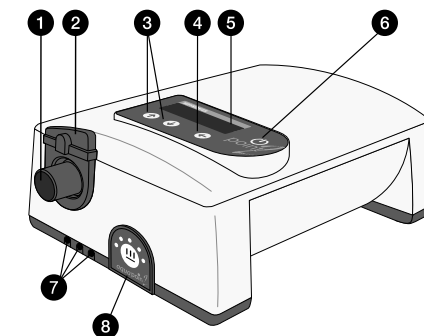

HOFFRICHTER
Quality makes the Difference ■■■■

- 1 Raccord du tuyau d'assistance respiratoire
- 2 Verrouillage pour humidificateur
- 3 Touches de sélection
- 4 Touche de saisie
- 5 Écran
- 6 Touche MARCHE/ARRÊT
- 7 Prises de contact pour humidificateur (variante d'équipement en option)
- 8 Élément de commande pour humidificateur (variante d'équipement en option)
- 9 Plaque signalétique
- 10 Port SD
- 11 Filtre ou orifice de raccordement pour le **filtersystempoint 2**
- 12 Arrivée d'air pour le capteur Baro
- 13 Interface RS232
- 14 Prise CC

Mode d'emploi résumé

à partir de la version du logiciel 3.400



HOFFRICHTER GmbH · Mettenheimer Straße 12/14 · 19061 Schwerin · Germany
Telefon: +49 385 39925-0 · Telefax: +49 385 39925-25 · E-Mail: info@hoffrichter.de
Web: www.hoffrichter.de · point 2 kurz FRA_2013-03-18_01, Art.-Nr.: 5000 0597






Ce document ne remplace pas le mode d'emploi du fabricant.
Respecter le mode d'emploi !

point

MISE EN SERVICE

1. Installer l'appareil conformément aux instructions d'installation (voir mode d'emploi).
2. Brancher le bloc d'alimentation sur l'appareil.
3. Raccorder le cordon secteur au bloc d'alimentation et brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
4. L'appareil se manifeste en affichant sur l'écran un message d'accueil, le type d'appareil, la version du logiciel et le nombre actuel d'heures de traitement, puis affiche la date et l'heure (veilleuse).
5. Raccorder le tuyau d'assistance respiratoire
 - a) à la sortie d'air et
 - b) au masque.
6. Calibrer l'appareil comme décrit au chapitre « Calibrage » du mode d'emploi lors de la première mise en service, du remplacement du masque et du branchement ou du débranchement de la prise du filtre antibactérien ou de l'humidificateur.
7. Mettre le masque. En mode de fonctionnement automatique, l'appareil se met en marche lors de l'inspiration et de l'expiration. En mode de fonctionnement manuel, appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT pour démarrer l'appareil..
8. L'appareil fonctionne tout d'abord avec la pression prescrite pendant la durée réglée par l'utilisateur pour le test du masque. S'assurer maintenant du positionnement correct du masque pour éliminer toute fuite éventuelle.
9. Placer le tuyau de manière à ce qu'il ne tire pas sur le masque lorsque l'utilisateur s'allonge.
10. Respirer maintenant profondément et tranquillement uniquement par le nez.

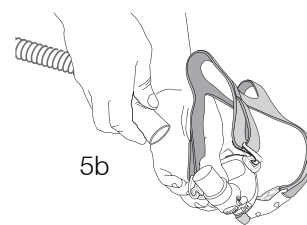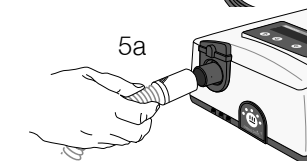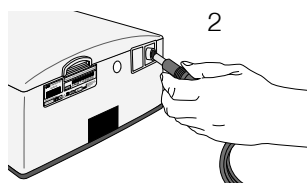

MENUS

Le point 2 dispose d'un menu standard et d'un menu complet. Pour basculer entre les menus, appuyer sur la touche de saisie . Maintenir ensuite les touches de sélection et enfoncées simultanément. L'écran affiche le message:

Menu standard
actif

ou

Menu complet
actif

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

Presser l'une des 3 touches suivantes pour régler les paramètres de l'appareil :

= Touche de sélection

= Touche de sélection

= Touche de saisie

1. Appuyer sur la touche de saisie pendant 1 seconde environ.
2. Le cas échéant, activer le menu standard ou le menu complet.
3. Accéder au paramètre suivant en appuyant sur les touches de sélection et . Un symbole de triangle pour modifier un paramètre.
4. Appuyer sur la touche de saisie , um einen Parameter zu ändern.
5. Régler la valeur souhaitée en appuyant sur les touches de sélection et .
6. Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche de saisie .

REMARQUE

Les réglages de certains paramètres sont protégés par un code PIN et doivent être effectués par le médecin.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DU RÉVEIL


- Appuyer sur la touche de sélection pour activer la fonction de réveil. L'écran affiche un symbole de cloche.
- Appuyer sur la touche de sélection pour désactiver de nouveau la fonction de réveil. Le symbole de cloche disparaît.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE RÉVEIL


1. Appuyer sur la touche de saisie pendant 1 seconde environ.
2. Sélectionner la ligne **Réveil** en appuyant sur les touches de sélection et .
3. Confirmer en appuyant sur la touche de saisie .
4. Régler l'heure de réveil en appuyant sur les touches de sélection et .
5. Confirmer le réglage de l'heure de réveil en appuyant sur la touche de saisie .

ACCESSOIRES (EN OPTION)


Humidificateur d'air
aquapoint 2

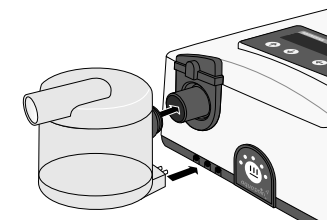

Système de filtration
filtersystempoint 2

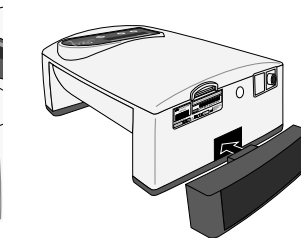

Akkupack
powerpackpoint 2

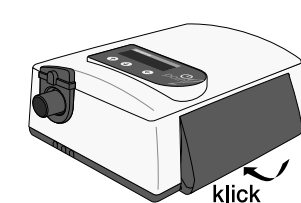

REMARQUE

La fonction Réveil n'a pas, à la livraison, été déverrouillée par l'usine. Elle peut toutefois l'être par un médecin ou un distributeur avec le logiciel TRENDset.